



Homia

HEAD SPA 取扱説明書

保管用

保証書付

一般家庭用美容器

このたびは
本製品をお買上げいただき、
誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。この
取扱説明書には保証書がついています。お読みになられた後も、
大切に保管して下さい。

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止しカスタマーサポートへお問い合わせください。

故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

⚠ 危険



禁止

- 次のような医用電子機器を使用している人は使用しない。
医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。
 - ・ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
 - ・人工心肺など生命維持用医用電子機器
 - ・心電計などの装着型医用電子機器

- 指定の部位以外や次のような部位には使用しない。

事故や肌・身体トラブルの原因になります。

- ・頭皮に傷・湿疹・腫れもの・化膿性疾患のある場合およびその部位
- ・皮膚炎・過度の日焼けなど、頭皮に異常がある場合およびその部位
- ・整形手術をした部位

⚠ 警告



禁止

- 次のような人は使用しない。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は、ご使用前に医師に相談してください。

事故や肌・身体トラブルの原因になります。

- ・アトピー性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、湿疹など頭皮に皮膚疾患がある方
- ・飲酒後や疲労の激しい場合
- ・アレルギー体質で特に肌が敏感な方
- ・シリコン製品などで皮膚にトラブルや障害をおこしたことがある方
- ・医師の治療を受けている方
- ・眠気をさそう薬を服用中の方
- ・急性疾患の方、悪性腫瘍のある方
- ・感染症疾患の方
- ・意思表示のできない方
- ・麻痺および知覚障害の方
- ・洗髪などにより頭皮にトラブルをおこしたことがある方
- ・出血性疾患・血友病疾患などの血液異常の方
- ・高血圧の方
- ・眼の病気、治療歴のある方
- ・妊娠中、生理中の方（ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因）

警告



禁止

- 薬（抗凝固剤等、血液が固まりにくくなる成分を含んだ薬）を服用中の方
- 乳幼児には使用しない。使用させない。ペットには使用しない。

● 動作中にアタッチメント(可動部)の間に 指を入れない。

けがをする原因となります。

● 付属品端子にピンやごみを付着させない。

感電やショートによる火災などの原因になります。

● ドライヤーやファンヒーターなどで本体や付属品を乾燥しない。

部品の変形・故障の原因になります。

● 医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。

事故やけが、体調不良の原因になります。

例) 血栓症、塞栓症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など



使用者
制限

● 子供や身体の不自由な人だけでの使用は避ける。未成年の方は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。

また、乳幼児や子供の手の届かない場所に保管する。

事故やけがをする原因となります。



用途以外
禁止

● 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

けがや本体が故障する原因となります。



浴室充電
禁止

● 浴室での充電は絶対にしない。

感電やショートによる火災などの原因になります。



無理な
扱い禁止

● USBコードを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。 また重いものを乗せ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。

感電やショートによる火災などの原因になります。

警告



分解禁止

- 分解や修理・改造はしない。
火災・感電・けがの原因となります。



傷んだ
コードプラグ
使用禁止

- USBコードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電やショートによる火災などの原因になります。



落下禁止

- 不安定な場所に置かない。また、本体や付属品を落としたり、ぶつけたりしない。
けがや本体が故障する原因となります。



異臭
異常発熱時
使用禁止

- 本体および付属品が、異臭・異常発熱したときは使用を中止する。
破損・発火の原因になります。



高温禁止

- 火のそばや炎天下、ほこりっぽい場所で使用したり、放置したりしない。
火中投下・加熱・高温での充電・使用をしない。また、熱器具に近づけない。
本製品は充電式電池を内蔵しています。
発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。



必ず守る

- 万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにする。また、充電をしているときは電源供給元からUSBコードをすぐに抜く。
けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。
- 使用中に痛みを感じたり、気分が悪くなったり、肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止し、医師に相談のうえ指示に従ってください。
- 本製品には必ず付属のUSBコードを使用する。付属品は他の製品には使用しない。
故障や事故の原因になります。

警告



必ず守る

- 本体に水が付着していないことを確認してから充電する。

感電やショートによる火災などの原因になります。

- 本体を使用しないとき・掃除するときは本体からUSBコードを外し、必ず電源をオフにする。

感電やショートによる火災などの原因になります。

- USBコードを抜くときは、コードを引っ張らずに先端部分を持つ。
また、ぬれた手で抜き差しはしない。

感電やショートによる火災などの原因になります。



禁止

- ドライヤーと一緒に使用したり、ドライヤーで本体を乾燥させない。

- 水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。

本体が故障する原因となります。

- 本体および付属品をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。

- 次に該当する人は使用しない。

髪の毛がからみつき、髪を傷める原因となります。

- 植毛をされている人。
- 部分かつら(テープ貼りつけ、エクステンションを含む編み込みなど)を装着中の人。

⚠ 注意




必ず守る

- アタッチメントを強く押しつけたり、早く動かしたりしない。過度に1ヶ所に集中して使用しない。髪の毛がからみついたときは、本体を停止させてからからんだ髪の毛を外す。
- 使用する時は、必ず全てのアタッチメントを取り付けた状態で使用する。
- 1部位1回5分以内、1日合計15分以内を目安に使用する。
頭皮に使用するとき、頭皮全体で5分以内を目安に使用する。
過度の使用は肌を傷める原因となります。
- 入浴剤入りのお湯や温泉では使用しない。万一、浸けてしまった場合は、水で十分に洗い流す。サウナなど高温多湿になる場所では、使用しない。
においや変色・故障の原因となります。
- シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合は、必ず本体を水洗いする。
本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因となります。
- 初めて使用するときや慣れるまでは、必ず低速モードから使用する。
事故やけがをする原因となります。
- 使用後は必ず本体の水分をしっかりと拭き取る。また、浴室など高温多湿の場所に放置しない。
本体がぬれたままの状態で放置すると、充電端子が腐食する原因となります。
- 軽くあて、絶対に強くあてない。
けがや本体が故障する原因となります。
痛みや異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。

⚠ 各部の名称

電源ボタン 電源ランプ

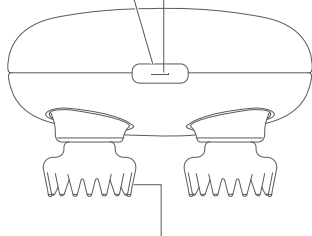

アタッチメント(4つ)


LED(赤色)※1

充電ポート
(Type-C)

充電口
カバー※2

アタッチメントを
外した場合

可動部

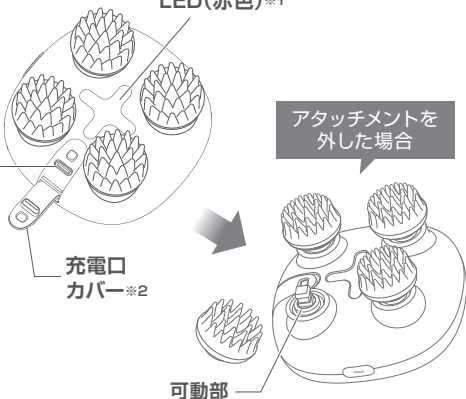

※1:LEDライトは直視しないでください。

※2:浸水を防ぐため、使用時はしっかりと充電口カバーを閉めてください。

カバーは強く引っ張らないでください。

※本体・付属品のデザインや仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。※本体は防水仕様になっています。入浴中でも使用することができますが、水やお風呂の中に浸水させたまま放置しないでください。※USBコードは防水ではありません。水がかからない場所で保管し、ぬれた状態での使用や、浴室内の充電は絶対にしないでください。

ご使用の前に(充電方法)


初めてご使用されるときや充電残量が減ったとき(電源ボタンランプが素早く連続3回点滅時)は、本体の電源をオフにしてから充電をしてください。

ご 注 意

- 初めて使用するときや長時間使用しなかったときは、満充電表示でも短時間しか使用できないことがあります。
- 充電中は電源をオンにしないでください。
- 本体の水分を丁寧に拭き取ってから充電してください。

— 電池残量低下時 —

電源ランプ
白色連続3回点滅

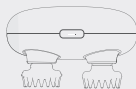


— 充電時間の目安 —

充電時間	動作時間
▼	▼
約2時間	約2.5時間

※充電推奨温度は15℃～35℃です。推奨温度外では充電時間がのびたり、充電しない場合があります。
※電池の残量や充電環境、および使用状況によって、充電時間や動作時間は前後します。

⚠ ご使用の前に(充電方法)

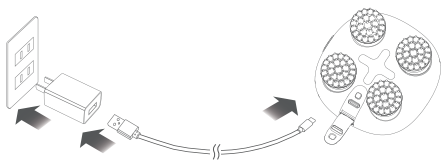

充電電池について

- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。(電池寿命は、使用・保管などの状態により変化します。充放電可能回数の目安は300回～500回です。)
- 電池は交換には対応していません。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。また1ヵ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。


- 1 | 本体の充電口カバーを開け、付属の充電用USBコードのType-Cコネクター側を接続する。
- 2 | USBコードのTypeAコネクター側をお手持ちのACアダプター等USBポートに接続する。

- 電源ランプが白色にゆっくり点滅し、充電を開始します。

※ 電源供給が可能なパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプター等のUSBポート(5V/1Aまたは5V/2A)をお使いください。また、一部のパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプター、急速充電器では、充電ができない場合があります。電源供給元を変更し、再度充電してください。

- 3 | 充電完了後、ACアダプターをコンセントから抜き、USBコードを本体から取りはずす。

※ 電源ランプが白色点滅から点灯になったら、充電完了です。

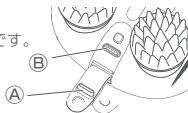

- 4 | 充電口カバーを閉める。

※ 充電口カバーの突起部分(A)が、充電ポートのくぼみ(B)に合うように挿入し、しっかりとカバーを閉めるようにしてください。

⚠ お掃除のしかた

- 1 | 電源がオフになっていることを確認し、本体についている髪の毛や汚れを水で洗い流す。

- 2 | 本体からアタッチメント(4つ)を取り外す。(図1参照)

※本体のアタッチメント差込口付近(Ⓐ)を片手でつまんで押さえながら、もう片方の手でアタッチメントをやさしく取りはずしてください。

アタッチメントを強く引っ張ると、本体のアタッチメント差込口がローラー軸から外れる場合があります。万一軸から外れた場合は、アタッチメント差込口を軸に差し込んで元の状態に戻してください。

- 3 | 付属の掃除用ブラシを使って各部の汚れを落とした後、水で洗い流す。

※図2、3のように本体の可動部、アタッチメントなどを掃除してください。




※汚れが取れにくい場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。

- 4 | タオルなどの乾いた布で、本体・アタッチメントの水分を拭き取り、風通しの良い場所で乾燥させる。

※充電口カバーを開け、中の水滴を拭き取ってください。拭き取り後、カバーは閉じてください。

※湿ったままの状態で充電台にのせたり、放置しないでください。においや変色・故障の原因となります。

- 5 | 本体・アタッチメントが乾燥したら、アタッチメントを本体に取り付ける。

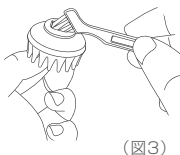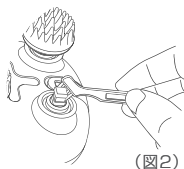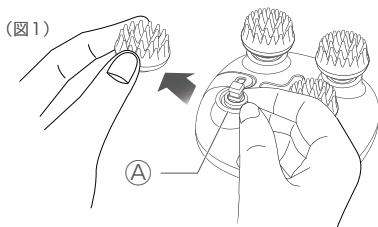

- 1** | シャンプーで髪全体を泡立てる。
※乾いた髪でも、頭皮ケアやリラクゼーションとしてお使いいただけます。



- 2** | 図のように本体をしっかり持つ。
※手についたシャンプーをよく洗い流してから持ってください。本体が滑って落ちると、けが・故障の原因となります。
※浸水を防ぐため、使用時はしっかりと充電口カバーを閉めてください。



- 3** | 電源ボタンを長押し(約3秒)してオンにし、お好みのスピードを選択する。
※電源ボタンを軽く押すたびに、低速・高速が切り替わります。



●おしあてる → 矢印の方向へすべらせる

- 4** | 前頭部と側頭部をケアする。
①生え際に約5秒間軽くあてる。
②生え際から頭頂部へ約5秒間かけてゆっくり移動させる。



※①、②を2回ずつ繰り返します。
※注意：軽くあてるようにし、絶対に強くあてないでください。

- 5** | 後頭部をケアする。手順4と同じ方法で生え際から頭頂部へ向かってケアする。



- 6** | 頭頂部と後頭部をケアする。
図の位置を頭頂部からえりあしに向かって、順に約5秒ずつ押し当てて移動する。
※頭皮全体で5分以内を目安に使用してください。



- 7 | ケアが終わったら、電源ボタンを長押し(約3秒)して電源をオフにする。
ボタンを長押ししなくても、動作開始から約15分経過すると、自動的に
電源がオフになります。

※使用後本体を清潔に保つために毎回お掃除をしてください。
詳しくは上記「お掃除のしかた」を参照ください。

- 8 | シャンプーを洗い流し、通常のお手入れ(トリートメントなど)をする。

ブラシの正しいあて方



⚠ 使い終わったら

保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体のお掃除をしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、USBコードを取り外してから保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。
長期間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。

廃棄について

本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。

(本体に内蔵されています。)

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



⚠ よくあるご質問

Q.充電が開始されません

⇒ACアダプターをコンセントに差し込みましたか？

『ご使用の前に(充電方法)』にしたがって接続し本体を充電してください。必ず付属の充電用USBコードを使用してください。ACアダプターは、付属していません。市販のUSB対応のACアダプター(5V/1Aまたは5V/2A)をご使用下さい。

Q.頭皮以外にも使用できますか？

⇒お顔や首と肩にもご使用可能です。

目の回りや肌が弱い箇所へのご使用はお控えください。

⚠ よくあるご質問

Q.途中で停止します

⇒本体の電池残量が不足しています。

『ご使用の前に(充電方法)』にしたがって本体を充電してください。

⇒オートオフ機能が働いています。

動作開始から約15分が経過すると、自動的に停止します。

⇒安全機能が働いて、本体が停止しました。

強く押し当てずに、軽く当てるようにしてください。

製品仕様

消費電力		約5W(充電時)
対応ACアダプター		定格出力:DC5V 1A*
タイマー		約15分
本体外形寸法		82×82×60mm
バッテリー		1200mAh、3.7V  (リチウムイオン充電池内蔵)
主な材質		本体:PC/ABS、シリコン アタッチメント:シリコン
セット 内容	本 体	HEAD SPA: 1台
	付属品	アタッチメント: 4個
		取扱説明書: 1部
		充電用USBコード (Type-C): 1本
		掃除用ブラシ: 2個

*2Aを超えるものは使用しないでください。(ACアダプターは市販のUSB対応の物をご使用下さい。)